


# SPECTRUM DPL PLUS

Prémium bőrfeszítő és pigmentkezelő rendszer

2024 A legújabb generációs,  
kíméletes pulzáló fénytechnológia

DPL Szőrtelenítés + szűrős DPL  
bőrfiatalítás

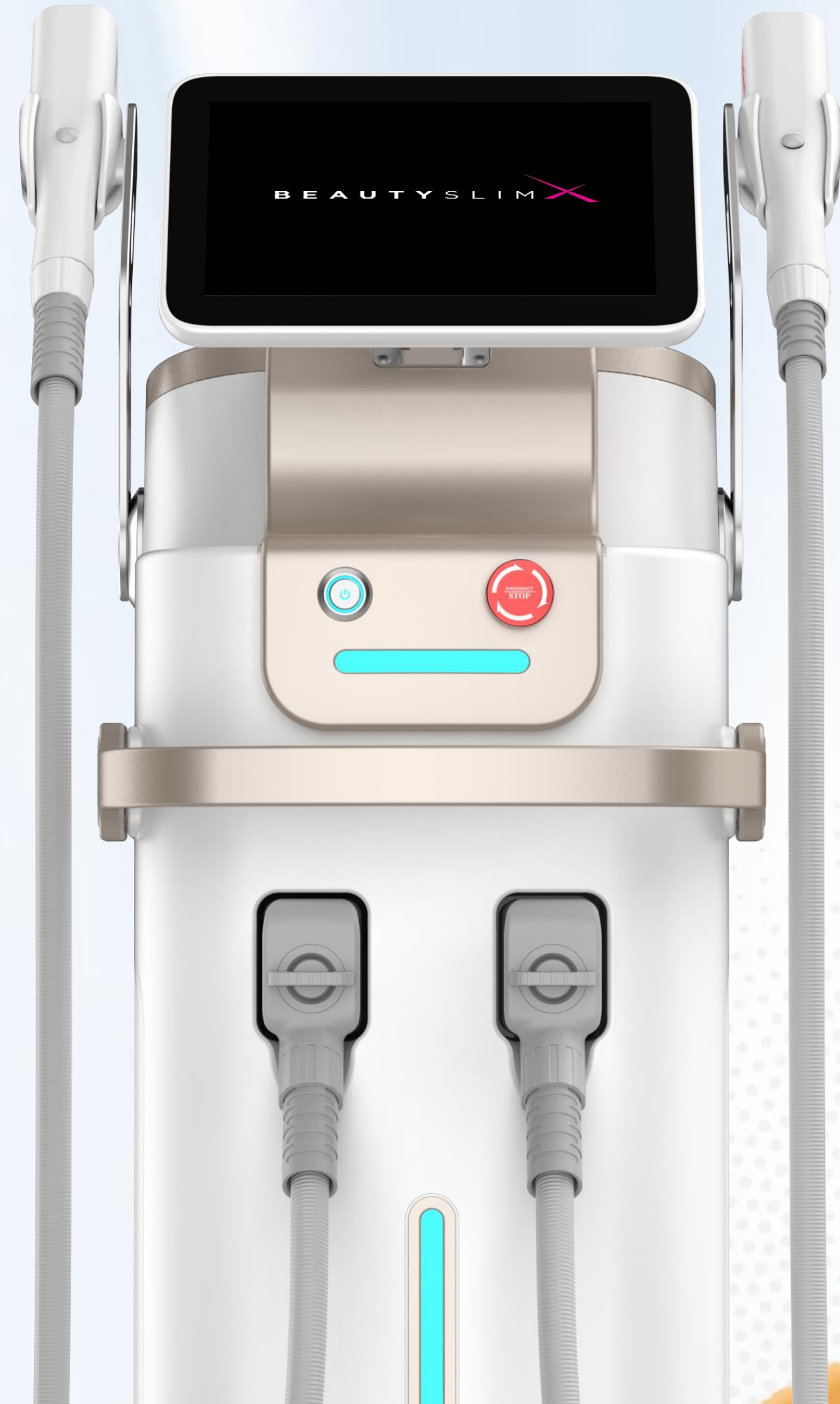

Hozd létre a bőrmegújítás új  
forradalmát

# DPL HR HANDLE

## DPL HR KEZELŐFEJ

Spotméret: **10\*50mm**

Hullámhossz: **650-950nm**

Lámpa élettartama: **1 millió villantás**



# FILTER DPL HANDLE

## FILTER/SZŰRŐ DPL KEZELŐFEJ






Spotméret: **10\*50mm**

Hullámhossz: **420nm;530nm; 515 nm, 560 nm; 590 nm; 615 nm;  
640 nm; 695 nm; 755 nm;**


Lámpa élettartama: **1 millió villantás**




A **DPL szőrtelenítés** nők és férfiak számára egyaránt alkalmas, és **minden bőrtípuson biztonságosan alkalmazható.**

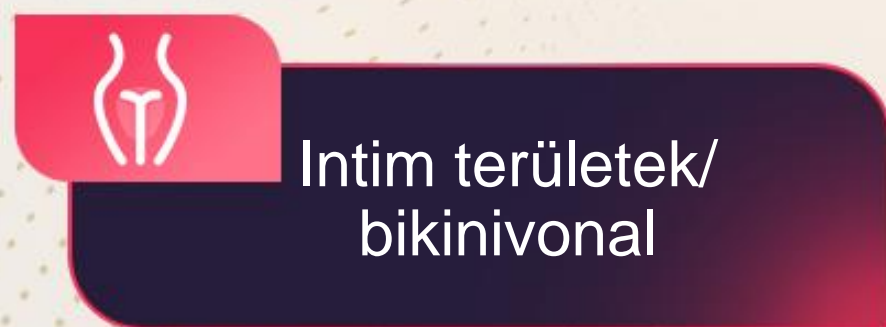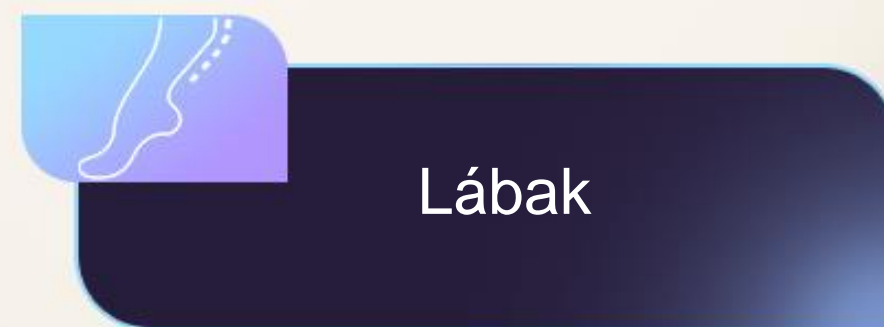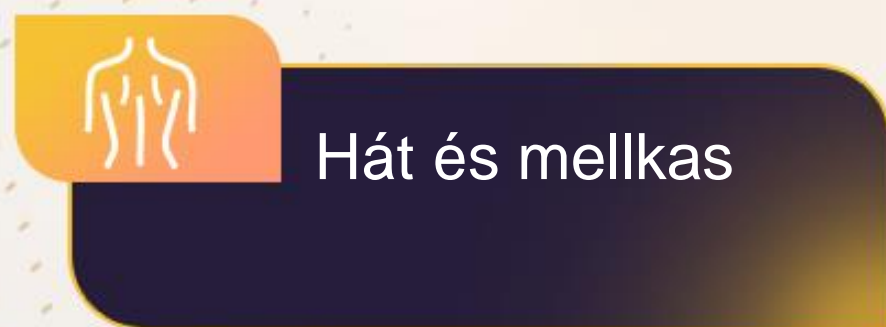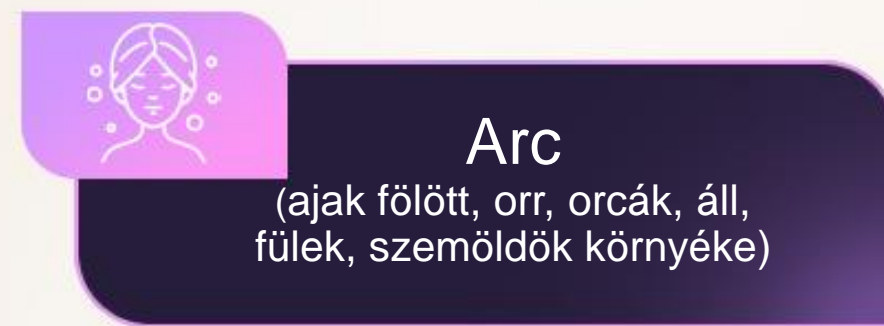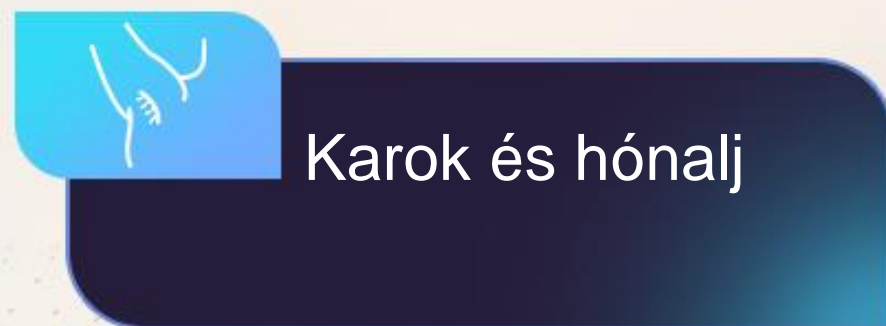

## A különbség az IPL és a DPL szőrtelenítés között

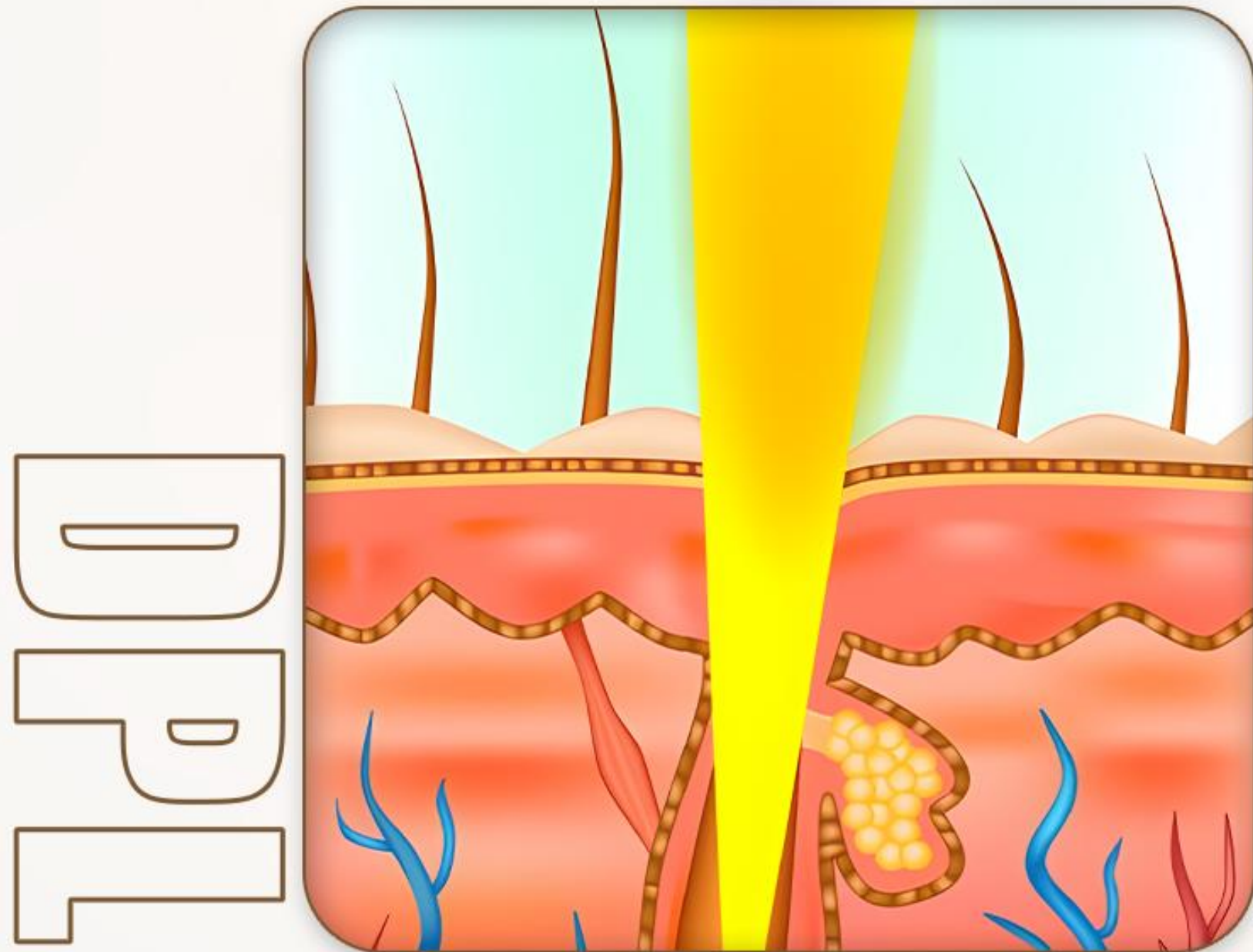

- Eltávolítja a finom és apró szőrszálakat is
- Irányított, kontrollált fényimpulzusokat használ, amelyek hatékonyan kezelik a legvékonyabb szőrszálakat is
- Minden szőrtípust eredményesen kezel

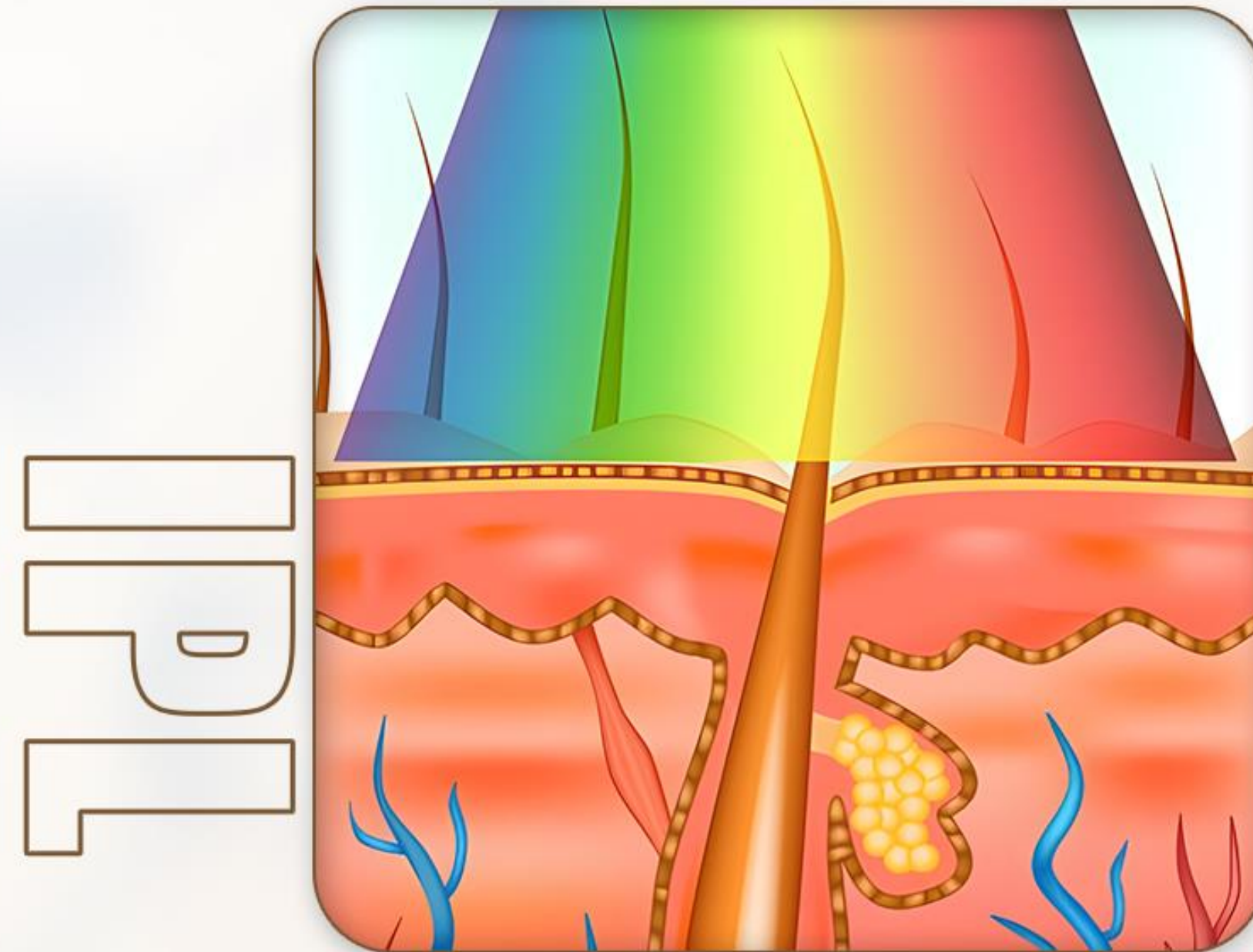

- Elsősorban a vastag szőrszálakat távolítja el, majd fokozatosan a vékonyabbakat is
- Folyamatos fénykibocsátást alkalmaz, ami időigényesebb és kellemetlenebb lehet
- Csak bizonyos bőrtónusokon és hajszíneken használható biztonságosan

Kezelőfej 1: DPL HR



Villámgyors, 8Hz-es szőrtelenítés –  
hatékonyság rekordidő alatt

# A DPL SZŰRŐNEK KÖSZÖNHETŐEN A BŐRFIATALÍTÁS GYORS ÉS EGYSZERŰ.

Kezelőfej 2: Filter/szűrő DPL

*With the Filter DPL, The Skin Rejuvenated is Easy.*



Akne



Felületi (epidermális) pigmentfoltok kezelése



Felületi pigmentfoltok, rosacea és bőrpír kezelése



Pigmentfoltok, hajszálértágulatok és bőrmegújítás kezelése.



Mélyebb dermális erek kezelése, bőrápolás, pigmentfoltok és érproblémák csökkentése



Arcban található tágabb erek kezelése, általános IPL bőrmegújítás, pigmentfoltok és hajszálértágulatok csökkentése



Faggyútermelés szabályozása, finom ráncok csökkentése, a bőr textúrájának javítása




Szörtelenítés





Mélyrétegű bőrfiatalítás

# Működési elv

Minél hosszabb a hullámhossz, annál mélyebb a behatolás a bőrbe.

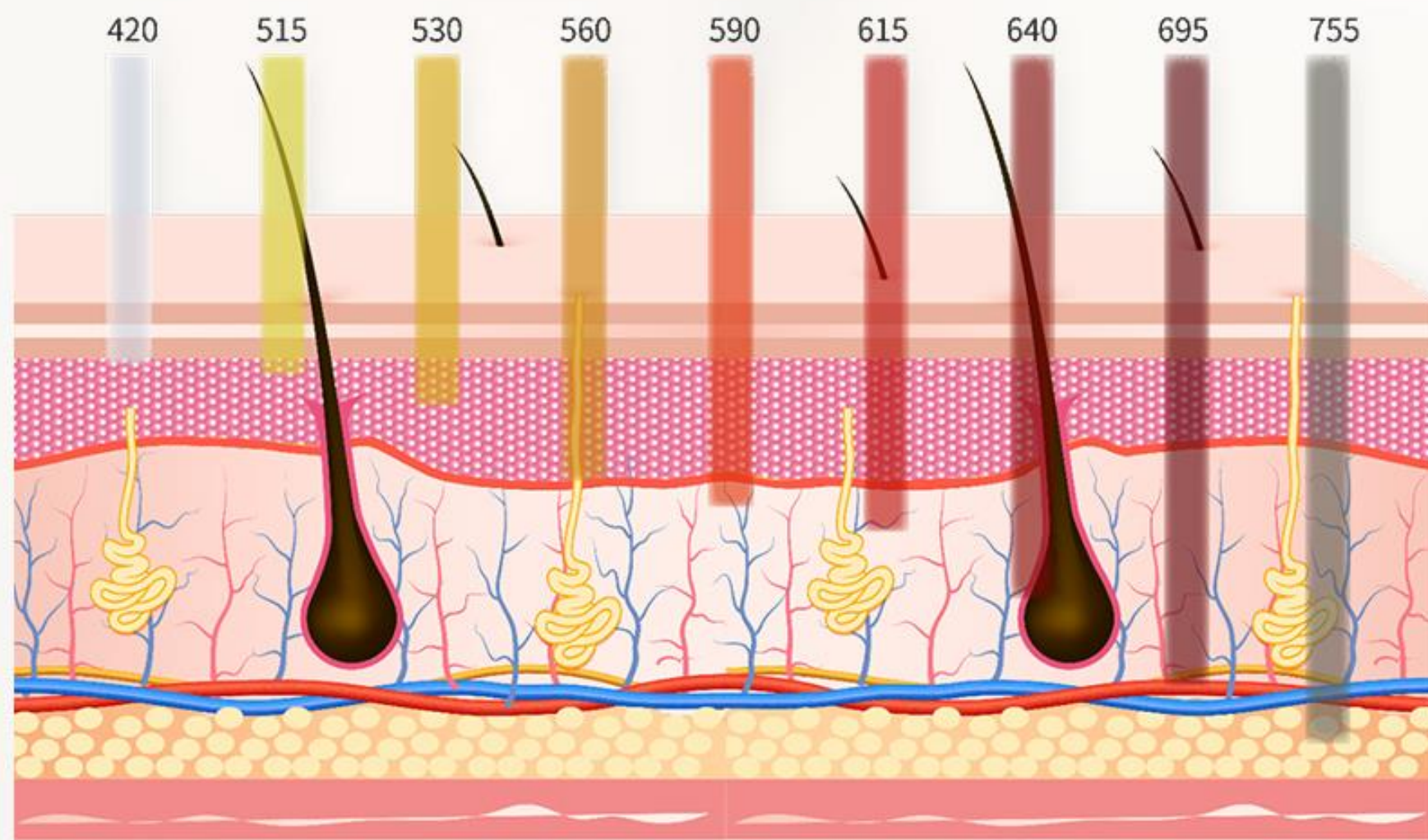


**01** Finom ráncok és mélyebb redők kezelése

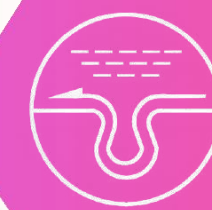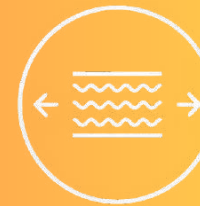

Pigmentfoltok és napkárosodott bőr kezelése **02**

**03** Kitágult pórusok kezelése

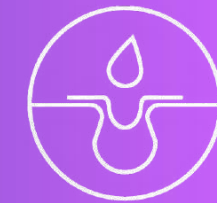

Bőrpír, hajszálértágulat (couperose) és rosacea kezelése **04**

**05** Bőrfiatalítás és aknekezelés



# Hűtött kezelőfej

- 4 - 20°C  
Hűtés




# **Cserélhető spotméret-adapterek**

Gyorscserés spotméret-adapterek

**A mágneses arany adaptereknek köszönhetően a spotméret gyorsan és egyszerűen cserélhető, így a kezelés kényelmesen alkalmazható kisebb és nehezebben elérhető területeken is..**




## OPT – Optimális impulzus technológia

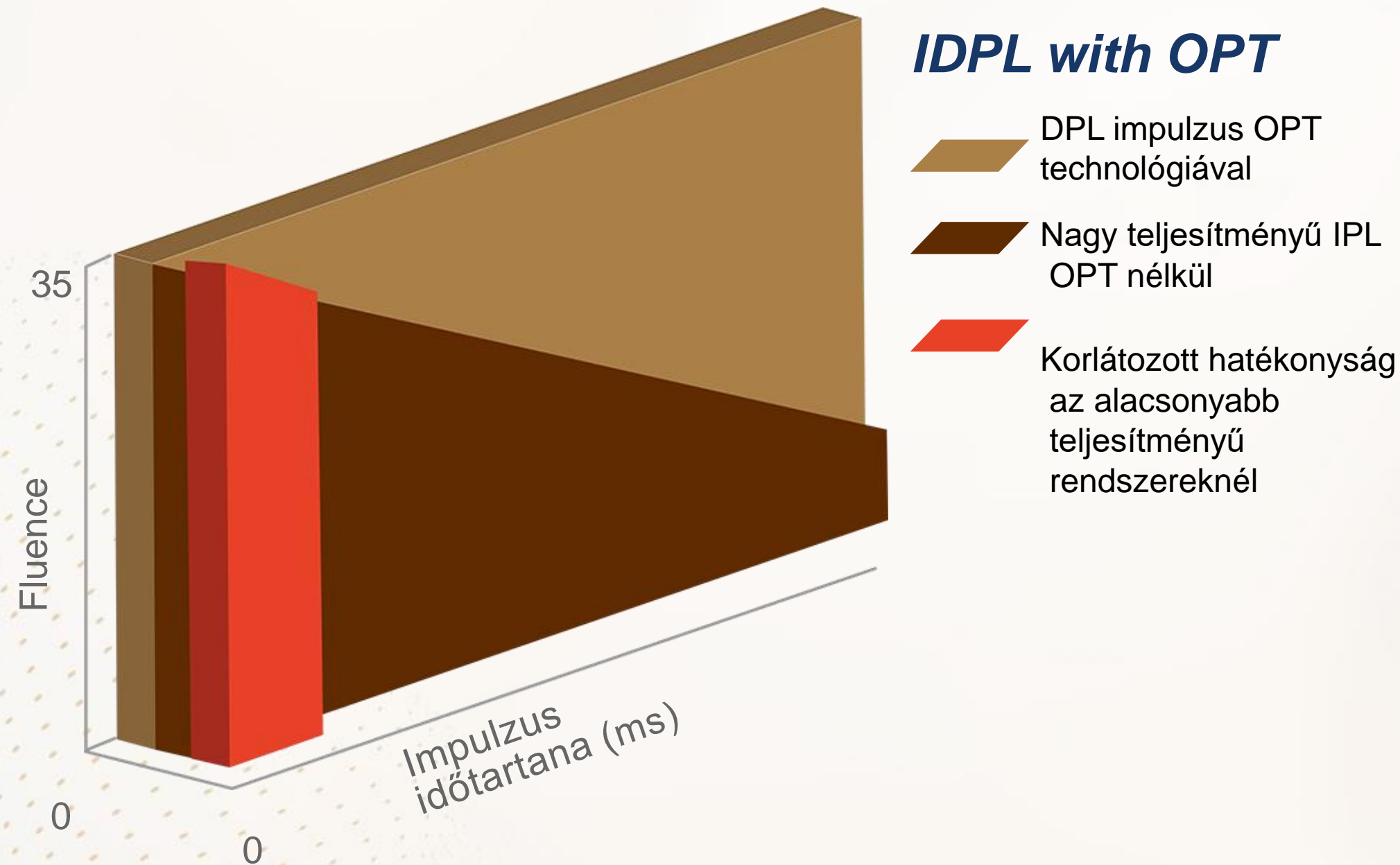

### Az OPT előnyei:

- **Magas csúcsteljesítményű, rövid impulzusú fény** – ideális a **DPL bőrkezelésekhez**, például **fényalapú bőrfiatalításhoz** és **jóindulatú pigmentált elváltozások kezeléséhez**.
- **Egyenletes energialeadás** a hosszabb impulzusidőtartományokban is.

## MSP – Többszörös, szekvenciális impulzus kibocsátás

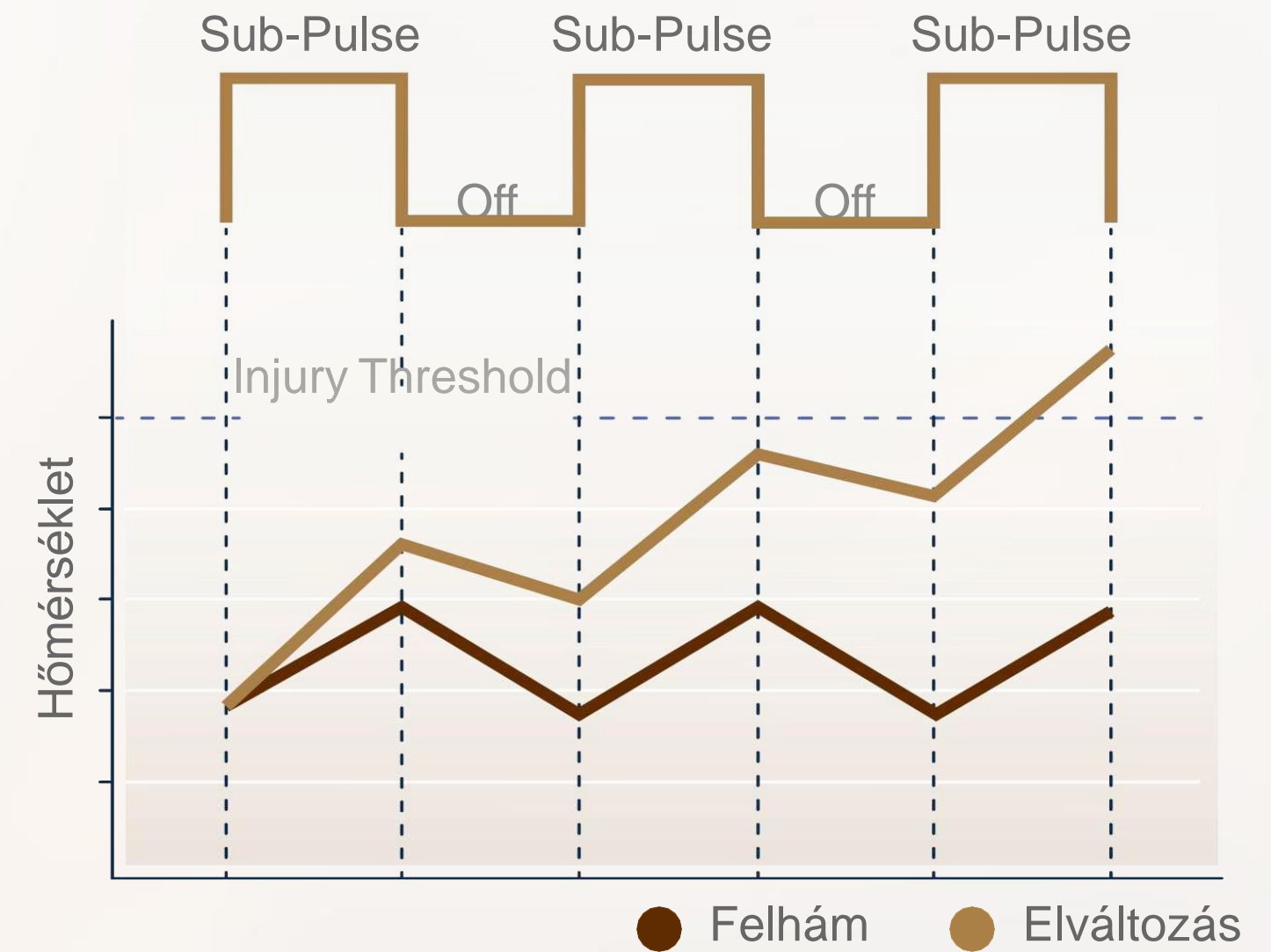

### MSP Technológia:

- A **többszörös, szekvenciális impulzus kibocsátás** lehetővé teszi a **bőr hűtését az impulzusok között**, ezáltal **csökkenti a bőrkárosodás kockázatát** a kezelések során.

# Előnyök



Kezeli az aknét, a rosaceát, valamint a pigmentált és érelváltozásokat. Emellett fényalapú bőrfiatalítással csökkenti az öregedési foltokat is.



9 szűrő – másodpercek alatt cserélhető.



**Optimal Pulse Technology (OPT)** szabályozza az impulzus formáját és hosszát a **precízebb, biztonságosabb** kezelésekért..



**-4 –20°C-os folyamatos kontakt hűtés a kényelmes, fájdalommentes** kezelésért.



**Multiple Sequential Pulsing (MSP)** biztonságosabb kezelést tesz lehetővé, mivel az impulzusok között **hűtési szakasz védi a bőrt.**



**DPL gyors szőrtelenítés** – hatékony, tartós eredmények rövid idő alatt.

# Felhasználói felület



SDPL for fast DPL hair removal



FILTER DPL with 9 filters



DPL for professional hair removal

# Paraméterek

## DPL Plus műszaki adatok

### HULLÁMHOSSZ

420-  
1200nm(szűrőkkel)  
560-950nm(HR)

### FLUENCE (energia sűrűség)

5-25J/cm<sup>2</sup>

### TÁPFORRÁS

Tiszta zafír optikai  
rendszer

### SPOTMÉRET

15\*50mm

### CSOMAGOLÁSI MÉRET

65\*55\*121cm

### SÚLY

87kg

### FILTERS/SZŰRŐK

420nm;530nm; 515 nm, 560 nm; 590 nm; 615  
nm;  
640 nm; 695 nm; 755 nm;

### BEMENETI TELJESÍTMÉNY

3000W

### LÁMPA

UK-ből importált prémium  
minőségű lámpa

### KONTAKT HŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET

-4°C-20°C (állítható)

### HŰTŐRENDSZER

Beépített vízűtés + félvezető hűtés +  
léghűtés kombinációja

### LCD KIJELZŐ

10.4 hüvelykes, színes érintőképernyős  
vezérlés



# ***Szőrtelenítés***



**Előtte**



**Utána Azonnali hatás**

- Mi garantáljuk az eredményt – hogy Ön is magabiztos lehessen!

# Szőrtelenítés



**Előtte**



**Utána Azonnali hatás**

•Mi garantáljuk az eredményt – hogy Ön is magabiztos lehessen

# A pórusok látható csökkentése, simább bőrfelszínért



**Előtte**

**Utána Azonnali hatás**

•Mi garatáljuk az eredményt – hogy Ön is magabiztos lehessen

# **Rosacea (értágulatokkal járó bőrpír kezelése)**



**Előtte**



**Utána 2 kezelés**

•Mi garanzáljuk az eredményt – hogy Ön is magabiztos lehessen

# Szeplők



**Előtte**



**Utána 2 héttel**

•Mi garantáljuk az eredményt – hogy Ön is magabiztos lehessen

# Érkezelés / hajszálértágulatok kezelése



**Előtte**



**Utána 4 héttel**

•Mi garantáljuk az eredményt – hogy Ön is magabiztos lehessen

# Akne és gyulladás kezelése



**Előtte**



**Utána 2 kezelés**

•Mi garantáljuk az eredményt – hogy Ön is magabiztos lehessen

# Üvegszáj-hatás



**Előtte**



**Utána Azonnali hatás**

•Mi garantáljuk az eredményt – hogy Ön is magabiztos lehessen