

Android 

# Unique **PatnixR**

Revolutionary Technology Multi-Dimensional RF Device

Forradalmi technológia – többdimenziós rádiófrekvenciás készülék




# Több mélység és több energiaszint egyetlen áthaladással

A PatrxR egy teljesen új kategóriát teremt a rádiófrekvenciás rendszerek között. A készülék lehetővé teszi, hogy az RF energia egyetlen tűbehatolással három különböző mélységbe jusson a bőrben, így minden réteg pontosan a megfelelő mennyiségű energiát kapja – minden alkalommal.

A rendszer egyetlen patron használatával 1,2 vagy akár 3 mélységet is kezel, így ez a 3 az 1-ben technológia feleslegessé teszi a többszöri áthaladást és:

- Többretegű szövetmelegítést biztosít egyetlen beszúrással
- Csökkenti a kezelési időt
- Javítja a páciens komfortérzetét és minimalizálja a kiesési időt

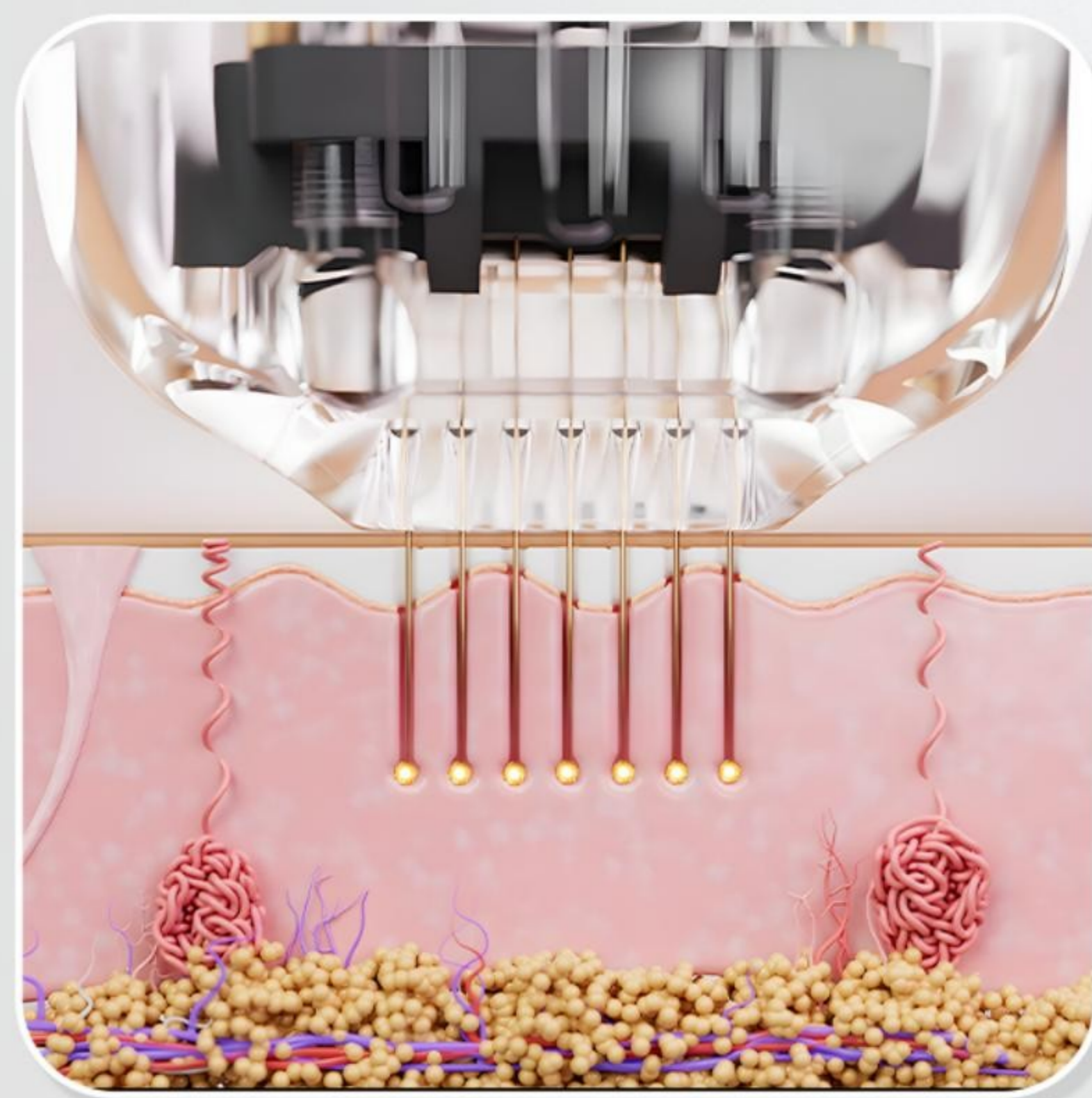


- A három külön beállítható mélység (0,1-4 mm) és az akár 4 J maximális energiatartomány egyetlen beszúráás során is használható

# PatrxR Applikátor - Bőrfelszín megújítása

A **PatrxR applikátor** rövid impulzusú rádiófrekvenciás (RF) energiát juttat a bőrbe az **R-25, R-49 és R-81** jelű fejek segítségével.

A készülék képessége, hogy milliszekundumos időközökkel **három különböző bőrréteget célozzon meg egymás után**, lehetővé teszi, hogy egyszerre három szinten történjen a kezelés. Ez **jelentősen lerövidíti a kezelési időt, minimálisra csökkenti a bőr károsodását, és egyenletesebb eredményt biztosít.**


Az orvosok számára ez egy új, **anti-aging és bőrfelszín-megújító megoldást** kínál, amely lehetővé teszi a **személyre szabott, frakcionált arckezeléseket és teljes testre kiterjedő kezeléseket.**

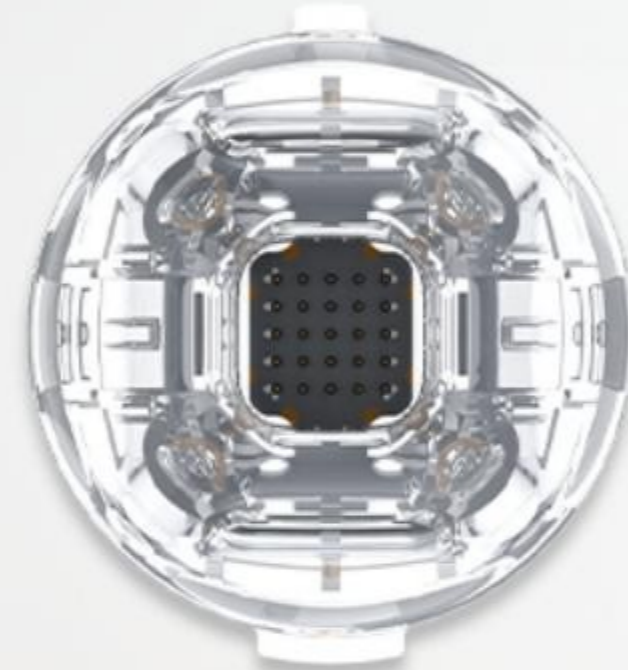

**R-25**

Arany bevonat


A tű tartós, és az aranybevonat alkalmazásának köszönhetően magas biokompatibilitással rendelkezik. Fémallergiás páciensek is használhatják, anélkül hogy kontakt dermatitistól kellene tartaniuk.

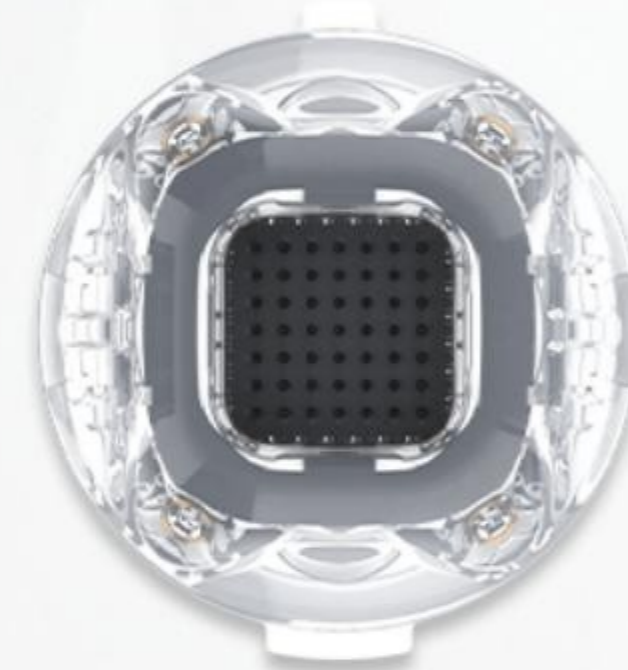

**R-49**

Tűmélység-szabályozás  
0,1–4,0 mm [0,1 mm-es  
lépésekben]

A készülék lehetővé teszi az epidermisz (felső bőrréteg) és a dermisz (irha) kezelését a tű mélységének 0,1 mm-es pontosságú szabályozásával.

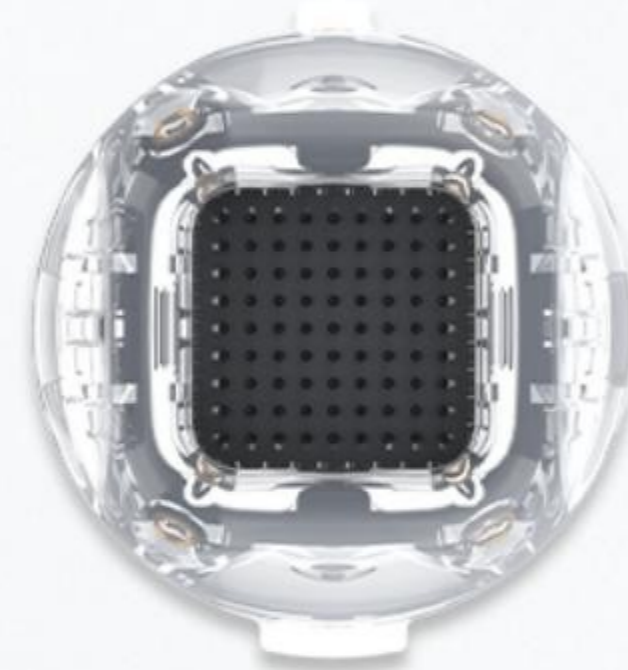

**R-81**

Biztonsági tűrendszer / Tű  
Vastagság: 0.2mm

A steril, egyszer használatos tűvég lehetővé teszi, hogy a kezelő könnyen észlelje az RF energia alkalmazását az LED-fény visszajelzése alapján. A tű szerkezete úgy lett kialakítva, hogy minimális ellenállással hatoljon át a bőrön, ezzel kíméletes és hatékony kezelést biztosítva.




# Impedancia - figyelés

A MatrixR rendszer három különböző módban figyeli a szövetek impedanciáját, hogy egyenletes és megbízható kezelési eredményeket biztosítson.

A MatrixR applikátor új szintre emeli az impedanciafigyelést, mivel több mélységben is működik.


**A rendszer intelligens és szabályozható, a rádiófrekvenciás energia pedig pontosan vezérelt.**

- Folyamatosan figyeli a bőr különböző állapotait
- Kiszámítja és megjeleníti a kezdő és befejező impedanciaértékeket másodperctörtek alatt
- Lehetővé teszi a beállítások és technikák finomhangolását, így a kezelés során pontos energiadózisok biztosíthatók

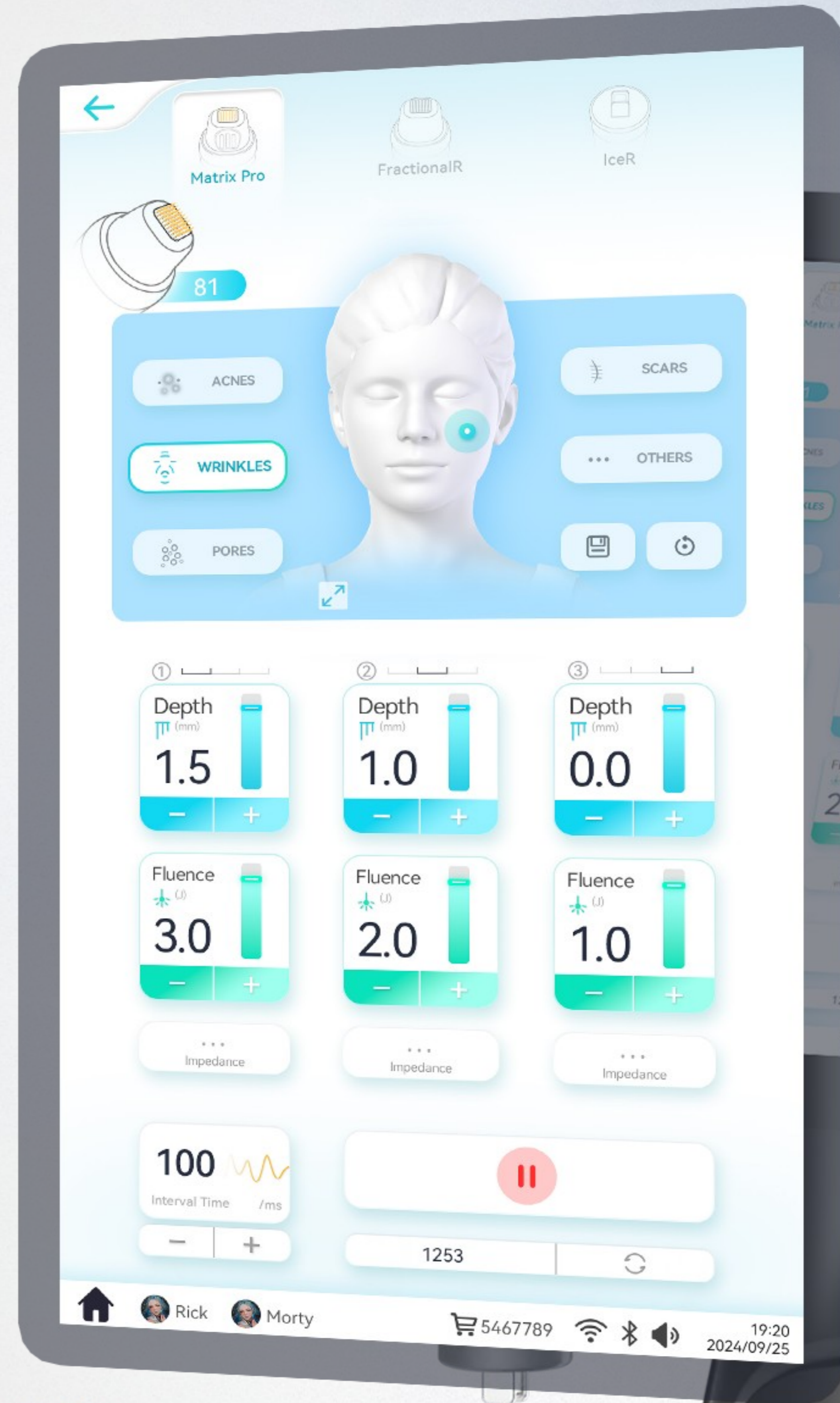

# FractionalR Applikátor- Bőrkorrekció

A FractionalR applikátor szigetelés nélküli kezelést alkalmaz, amely stimulálja az új kollagén termelődését, és megújítja a bőrfelszínt bipoláris RF energia segítségével. Ez a kezelés sima, feszesebb bőrt eredményez, valamint csökkenti az arcon megjelenő ráncokat.

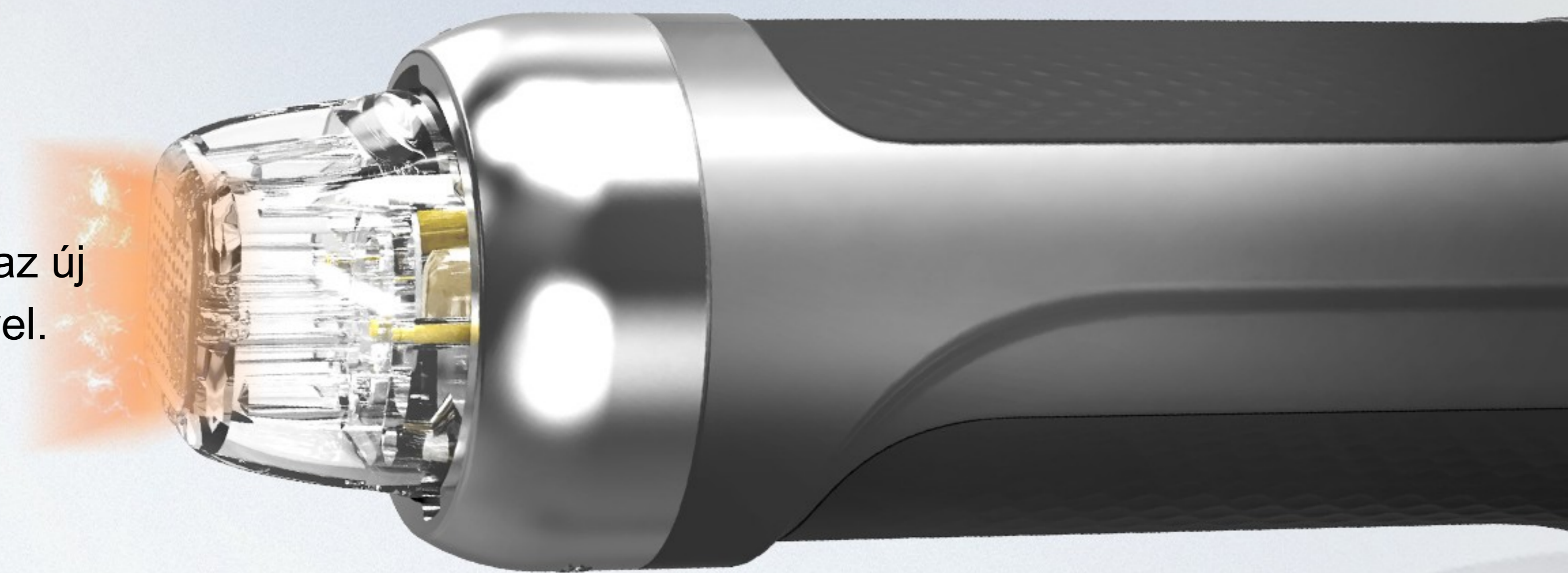


**F-3\*3**

- Szemkörnyék
- Orrkörnyék




**F-5\*5**

- Arcterület

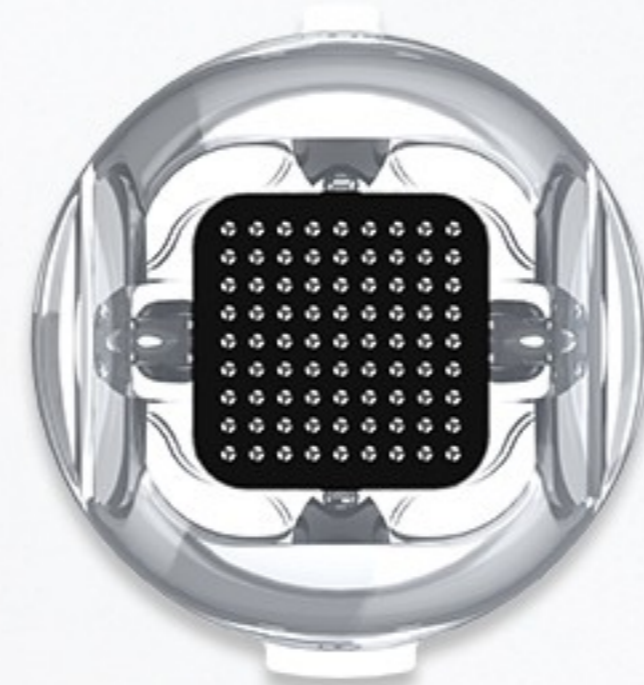

**F-9\*9**

- Testterület

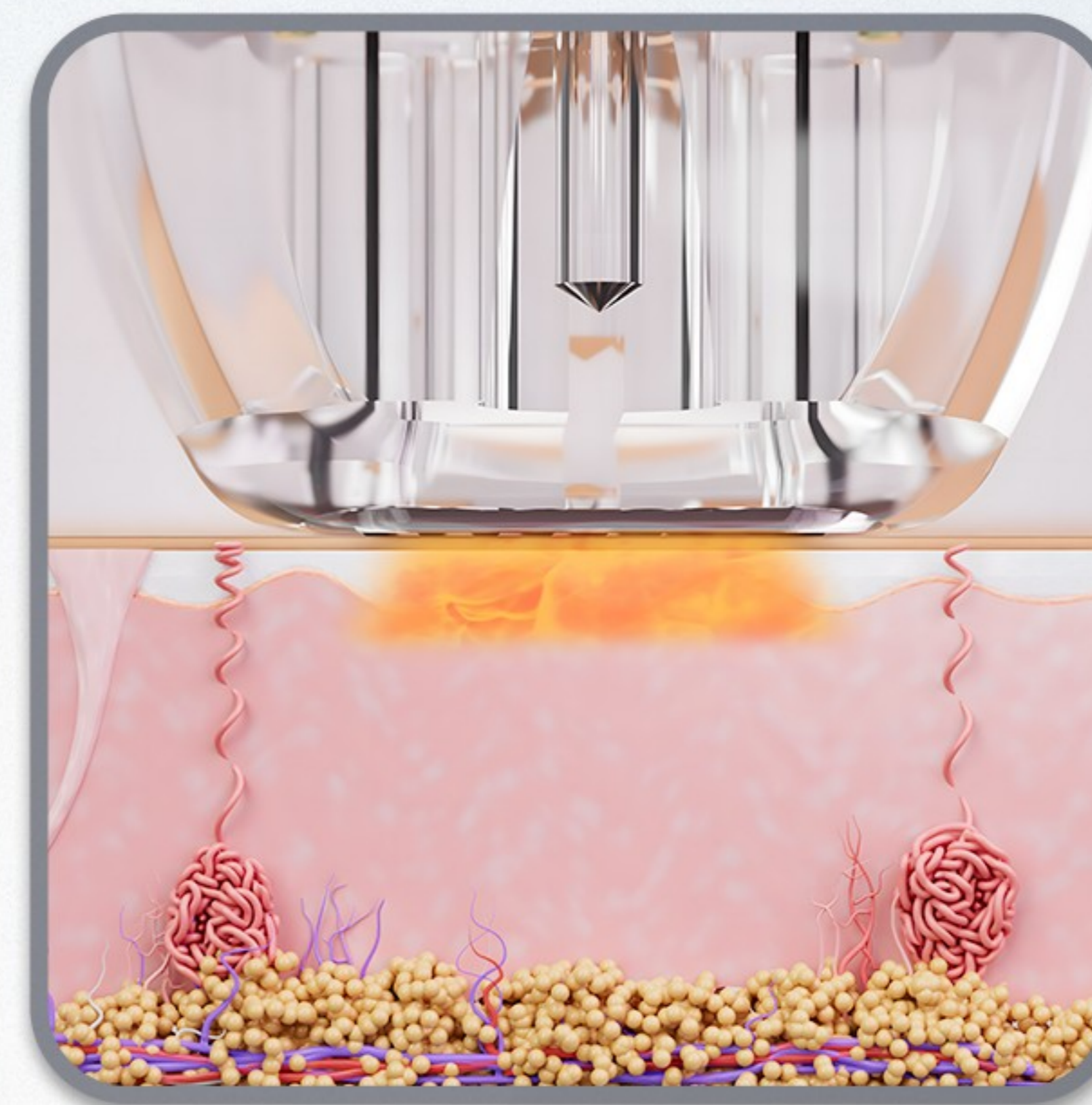


- --Nem invazív eljárás
- --Nincs felépülési idő
- --Kezeli az arci ráncokat
- --Javítja a bőr felszíni tónusát és textúráját

# IceR Applikátor- Bőrfeszítés és bőrkarbantartás

Az Ice rádiófrekvenciás bőrfeszítő technológia egyedülálló, intelligens epidermális hűtőrendszerrel rendelkezik.

A bőr felső rétegének előhűtése lehetővé teszi, hogy a rádiófrekvenciás energia mélyebbre, a dermisz rétegébe jusson, így megóvjaa az epidermiszt az égési sérülésektől, miközben a hőenergiát a bőr alsóbb rétegeire összpontosítja.

Ezáltal hatékonyabban serkenti a kollagén regenerációját a dermiszben.

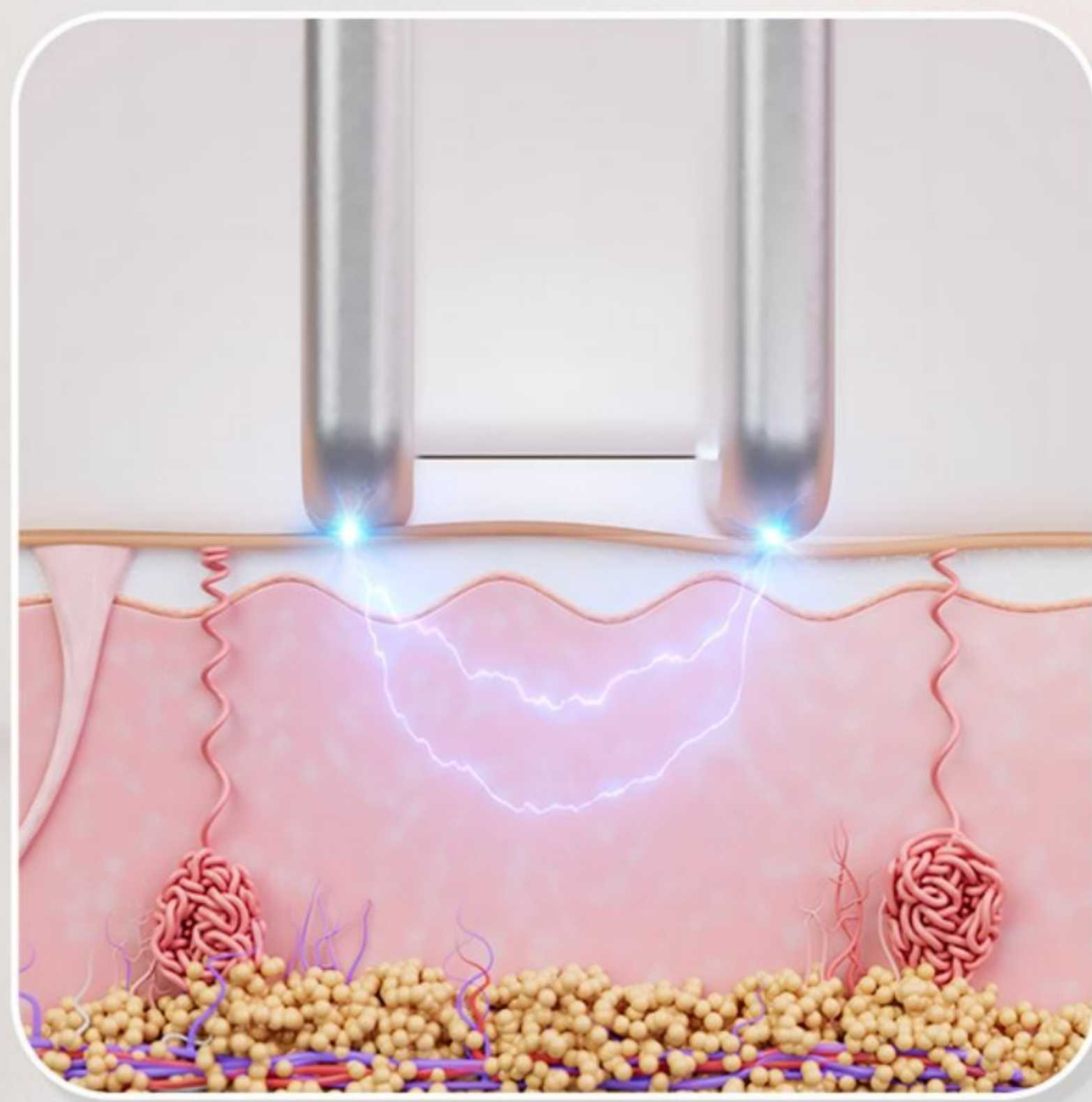

- **Infravörös fény + bipoláris RF**
- **Kollagénstimuláció**
- **Azonnali és hosszú távú hatás**
- **Ráncok csökkentése**



# Műszaki adatok

Kezelőfej	PatrxR Applikátor	FractionalR Applikátor	IceR Applikátor
Energia J	0.5-4J	1-50J	RF:1-12J 940 lámpateljesítmény: 5W Hűtőchip: 3.7V 10.5W
Impulzusszélesség	20-800ms	20-800ms	20-800ms
Impedancia	200-1200	200-1200	200-1200
Tűtípus	Szigetelt & Nem szigetelt tűk	Nem invazív	Nem invazív
Lövésterület	R-25pin:6.4*6.4mm R-49pin:9.2*9.2mm R-81pin:12*12mm	F-3*3 : φ9.8mm F-5*5 : φ9.8mm F-9*9 : 15.8*15.8mm	8*8mm
Tű átmérő	0.2mm		
Automatikus felismerés	Igen	Igen	

<b>Teljesítmény</b>	<b>400W</b>
Kijelző ( inch )	Android 13.3 inch
Frekvencia	2MHz
RF energia	30W
Impulzus időtartam	20-800ms
Impedancia	200-1200Ω
Tűtípus	Szigetelt és nem szigetelt
Tűmélység	0.1mm-4mm
Feszültség	110V/220V
Gép mérete	450*345*1035(mm)
Gép súlya	30kg
Csomagolási méret	730*625*1190(mm)
Csomagolási súly	65kg



## Advantage

## Előnyei



### Android

Smarter, easier to operate

**Android rendszer**  
Okosabb, egyszerűbb kezelés

### Multi-dimensional RF operation

Save time



**Multidimenziós RF működés**  
Gyorsabb kezelési idő,  
nagyobb hatékonyság



### Ice radiofrequency skin tightening

Remove wrinkles

**Jéghűtéses rádiófrekvenciás bőrfeszítés**  
Ráncok csökkentése, hűtött komfortérzet

### Impedance

More professional treatment




**Impedancia technológia**  
Professzionális, személyre szabott kezelések



### Automatic needle identification system

**Automatikus tűfelismerő rendszer**  
Biztonságosabb és pontosabb működés

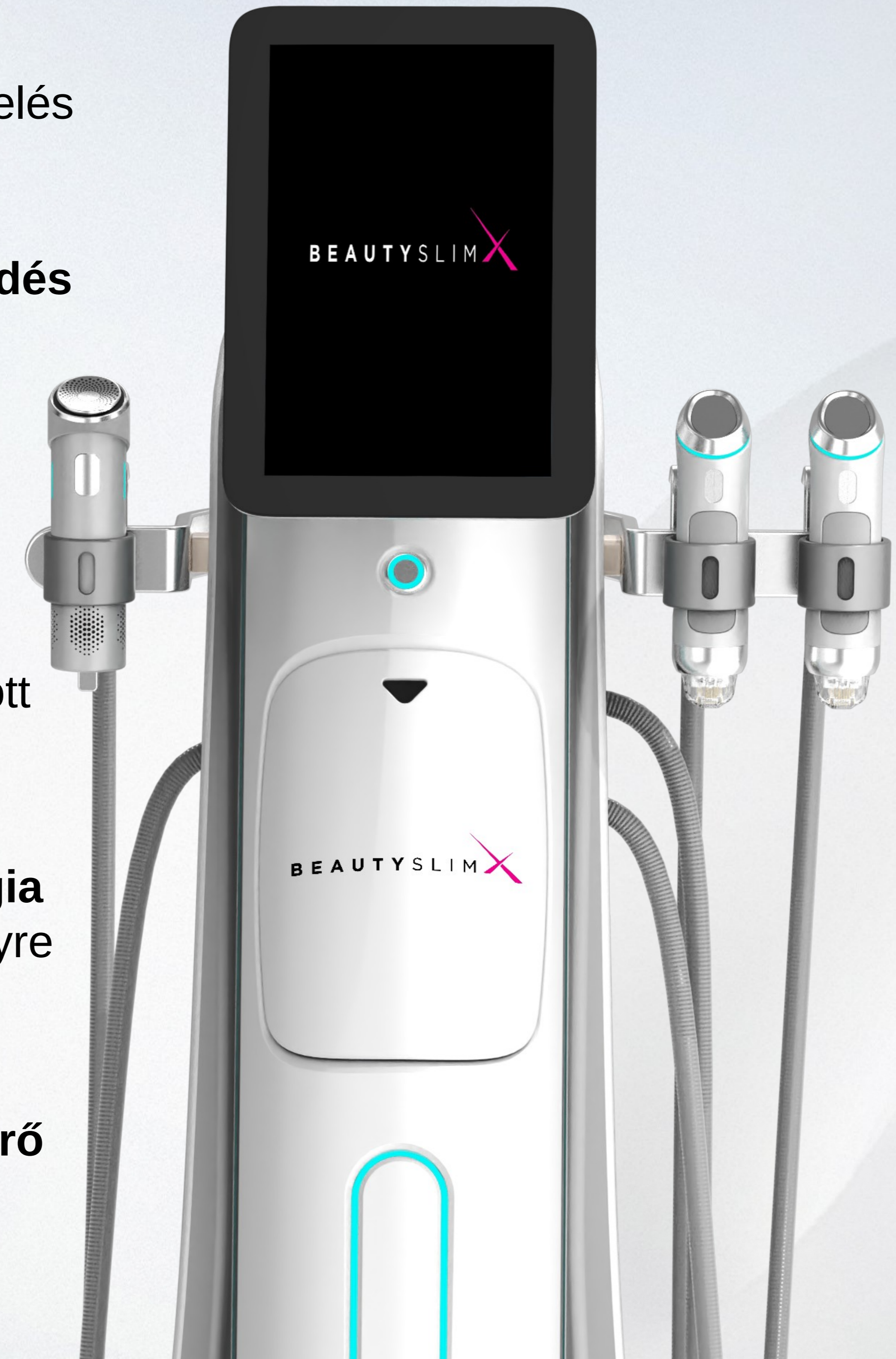

**Köszönjük**

**!**