

Legújabb generáció

Fejlett mikrotűs kezelés

A felszíni készítményeket mélyebbre juttatja a dermiszbe, ami fokozott felszívódást eredményez. Az M és F típusú tűkkel akár 67%-kal hatékonyabb a hatóanyag-penetráció.



PINXEL-V



Léptetőmotoros technológia



Aranybevonatú mikrotűzés




Egypólusú és kétpólusú technológia




Teljes test kezelés




A kezelés alapelvei

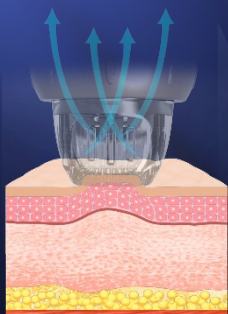


Automatikus bőrfelismerés

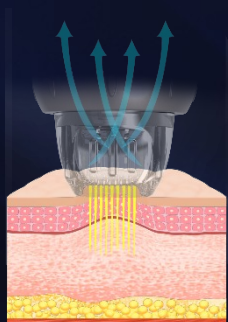


Mikrocatornák kialakítása

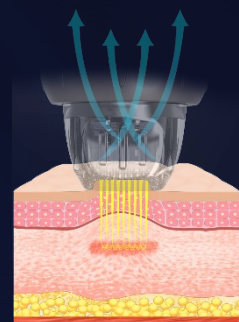

Vákuum- és túkioldás

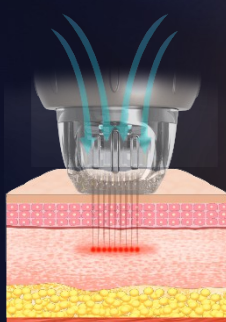

Kész / Befejezve

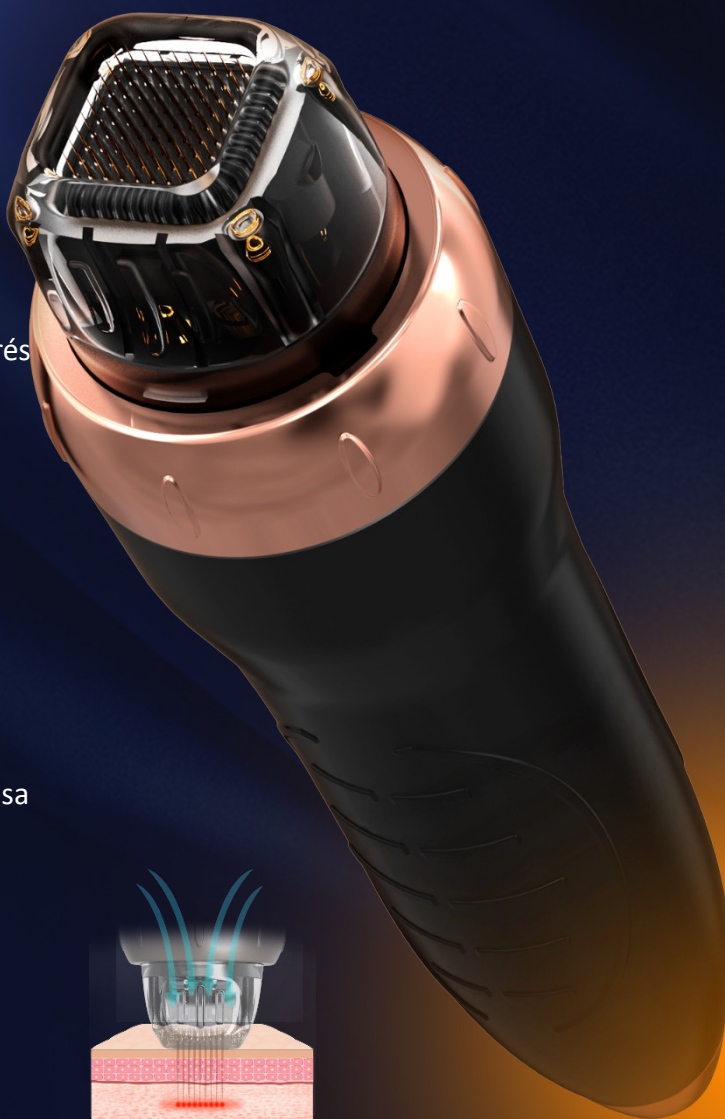

Alkalmazási



ARC


Finom és mély ráncok, tág pórusok,
aknés hegek kezelése.

Finom ráncok

Mély ráncok

Tág pórusok

Aknés hegek

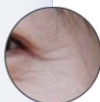

TEST

Striák, traumás vagy műtéti hegek,
valamint laza, megereszkedett bőr
kezelése.



Striák


Traumás vagy műtéti hegek

Laza, megereszkedett bőr
kezelése




Mikrotűs rf applikátor

PINXEL-V

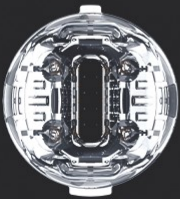

M-18

Léptetőmotoros
technológia

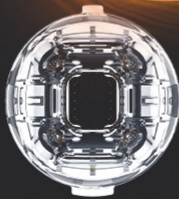


M-25

Tűmélység-
szabályozás



M-49

Aranybevon
atú tűk

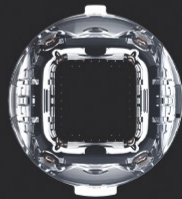


M-81

Biztonsági
tűrendszer

Frakcionált Rf applikátor

PINXEL-V

Frakcionált RF applikátor a nem invazív ránccsökkentéshez, ideális azoknak a pácienseknek, akik tartanak a tűtől. Nincs leállási idő, a felépülés gyors.

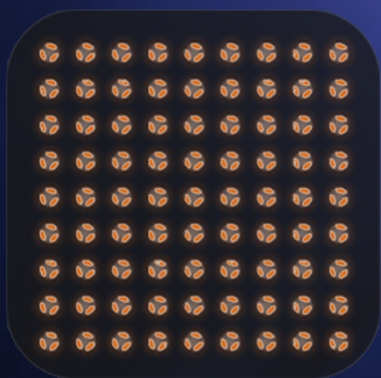


F-3*3

Arc
Orrterület



F-5*5


Arcterület

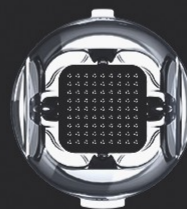


F-9*9

Testterület

Monopólus/ Bipólus

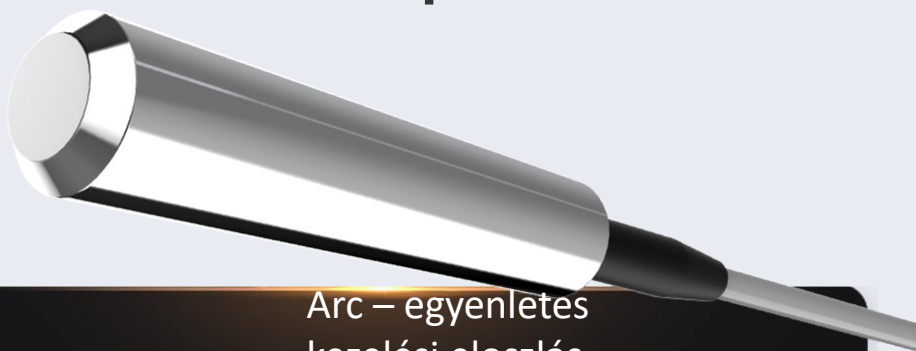


Arc – egyenletes
kezelési eloszlás
Bipoláris módban
alkalmazva

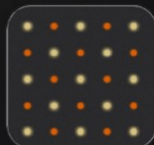

A tűk 50%-a pozitív, a másik 50% negatív pólusú. Ennek köszönhetően az energia kizárólag a tűk behatolási mélységében fejt ki hatását. Ez az üzemmód különösen alkalmas arckezelésekhez.

Test – mélyebb
behatolás

Monopólus módban

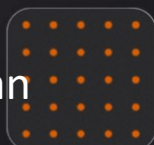

A kezelőfej összes tűje pozitív pólusú. A páciensnek a kezelés során kézzel kell tartania a negatív pólust. Az RF energia így mélyebbre tud hatolni a bőrbe, mint bipoláris módban, ezért ez az üzemmód különösen alkalmas testkezelésekhez.

Mondjuk búcsút a kezelés közbeni fájdalomnak



PINXEL-V



Hűtőkezelőfej

A hűtőfej a kezelés előtt vagy után használható. Segíti a jobb eredmény elérését, növeli a vendég komfortérzetét és csökkenti a fájdalmat.



Paramét

— er



PRODUCT

PINXEL-V AND PINXEL-VPRO

Teljesítmény Max. 50 Watt

Kezelőfej Frakcionált RF kezelőfej
Mikrotűs RF kezelőfej

Frekvencia 2MHz frekvencia

Energia 1-10 szint

Impulzushossz 10-900ms impulzusidő

Tűmélység 0.4-4mm között állítható tűmélység

Nyomásszint 1-4 nyomásszint

Üzem mód EGYES/AUTOMATA üzemmód

Mód MONOPÓLUS & BIPÓLUS üzemmód


Hűtés 1-3 szint

Fejek Szigetelt & Nem szigetelt tűk

Invazív fejek M-18, M-25, M-49, M-81

Nem invazív fejek F-3*3 , F-5*5, F-9*9

A kezelés hatásai

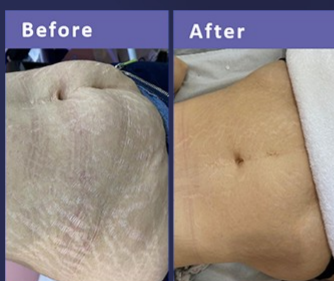

Striák – életkori sajátosságok

5. szint / 2,0 mm tűmélység / 150 ms impulzus / 2 menet
3 hét szünet / 1 kezelési alkalom



Sérülésből eredő hegek

4. szint / 1,0 mm tűmélység / 140 ms impulzus / 2 menet
3 hét szünet / 3 kezelési alkalom



Aknés pórusok

4. szint / 1,5 mm tűmélység / 120 ms impulzus / 1 menet
3 hét szünet / 1 kezelési alkalom